



Простота ухода за раной в домашних условиях

ТОРИВАС ТОРИ

КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ ВАКУУМНОЙ
ТЕРАПИИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН

5 классических наборов повязок для компактного устройства одноразового использования TOPi A100



3 режима вакуума:

-75 мм
рт.ст.

-100 мм
рт.ст.

-125 мм
рт.ст.

A100, A200 позволяет проводить лечение ран за счет создания отрицательного давления в зоне повреждения. Предназначено для одноразового использования одним пациентом.

Система для местной вакуумной терапии ускоряет заживление тканей за счет усиления в них микроциркуляции. Устройство и набор повязок – система, эффективно обеспечивающая активизацию процесса заживления ран.

Набор повязок и прибор для местной вакуумной терапии являются активной системой для лечения ран, обеспечивающей максимальный комфорт для пациента. Его компактная эргономичная мобильная конструкция (прибор размером с мобильный телефон) обеспечивает пациентам удобство передвижения, не ограничивая их повседневную жизнь во время лечения ран.

Система для местной вакуумной терапии быстро и эффективно заживляет раны, снижая потребность в квалифицированном персонале, повизобеспечивает простоту ухода за ранами в домашних условиях и мобильность пациентов. Сокращает количество госпитализаций, снижает затраты на лечение.

5 НАБОРОВ повязок для лечения резаных ран для мобильного устройства одноразового использования TOPi A200



3 режима вакуума:

-35 мм
рт.ст.

-50 мм
рт.ст.

-65 мм
рт.ст.

TOPi A100 и A200 обеспечивают непрерывное удаление экссудата из раны с помощью специального набора повязок, накладываемых на раневую область. Материал, из которого изготовлена повязка, обеспечивает равномерное распределение отрицательного давления по всей пораженной области. Заживление раны происходит за счет образования грануляций. В отличие от A100, прибор A200 предназначен для терапии послеоперационных ран. Уровень вакуума, создаваемого A200, ниже, а повязка, изготовленная из специального губчатого материала, удерживает края разреза, не повреждая швы, обеспечивая быстрое заживление раны и помогая предотвратить образование рубцов.



Раны при диабетической стопе



Хроническая рана



Венозная язва



Пролежни



Раны после ожогов



Инфицированные раны

Используется для быстрого заживления всех видов ран площадью до 100 см² по назначению врача


ТОРІ А100 КЛАССИК

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАКИХ РАН МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА СИСТЕМА?

ТОРІ А200 для послеоперационных ран



Раны после пластических операций

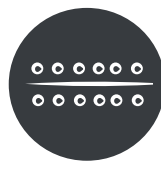

Раны после кесарева сечения



Резаные раны



Раны после кардио-торакальных и
сосудистых хирургических операций



Акушерские и
гинекологические раны



Ортопедические и
хирургические раны

Применяется врачами после операций для ускорения заживления раны, снижения риска появления внутрибольничных инфекций, предотвращения инфицирования раны и ее рубцевания.

Мобильный одноразовый вакуумный набор (ЛРОД*) для ухода за ранами ТОРІ

* лечение ран отрицательным давлением

Мобильный одноразовый вакуумный набор для ухода за ранами ТОРІ включает 5 стерильных повязок для лечения.

- 1 мобильное устройство для вакуумной терапии ран одноразового использования ТОРІ (ЛРОД)* (ТОРІ А100 или ТОРІ А200)
- Набор из 5 стерильных повязок (для каждого из устройств- Classic или Incision)
- Канистры для сбора экссудата объемом 75 куб.см, 5 шт.
- удлинительный шланг, 1 шт.
- дополнительная драпировка 30х40 см, 1 шт.
- сумка для транспортировки устройства, 1 шт.
- руководство пользователя, 1 шт.



Устройство для вакуумной терапии ран ТОРІ А100 Классик ЛРОД



Классический набор повязок:
10*10 см повязка из губчатого материала???
1 шт. трекпад
1 шт. 30х40 см драпировка
1 шт. линейка



30*40 см драпировка



Удлинительный шланг



ТОРІ А200 для резанных ран ЛРОД Устройство для вакуумной терапии ран



Набор повязок для резанных ран
4,5*22 см повязка из губчатого материала
1 шт. трекпад
1 шт. 30х40 см драпировка
1 шт. линейка



Канистра объемом 75 см³



Сумка для транспортировки устройства



Практичный и простой в использовании

- Простота начала и завершения терапии (управление одной кнопкой).



Система визуального и звукового оповещения

- Высокий уровень безопасности благодаря системе визуального и звукового оповещения (мгновенное оповещение при утечке вакуума, заполнении емкости и низком заряде батареи).



Простота использования

- Нулевой риск контаминации.
- Нулевые затраты на профилактическое обслуживание.
- Система на основе канистры для эффективного удаления экссудата.
- Незаметна для окружающих. Небольшой размер, легкий материал, позволяющий переносить канистру, повесить ее на тело или спрятать под одеждой. Помогает вести активную социальную жизнь.
- Благодаря инновационной конструкции, обеспечивает бесшумную работу во время терапии, не беспокоит вас даже во сне.
- Непрерывное лечение благодаря эффективному использованию батареи.



Простота использования без привлечения квалифицированного персонала

- Применима в условиях стационара, при амбулаторном или домашнем лечении.



Не оказывает раздражающего действия на кожу

- Оптимальная воздухопроницаемость для здоровой кожи пациента при сохранении вакуумной среды в зоне раны.
- Специальная пенная система из губчатого наполнителя, используемая для отсасывания экссудата и любых раневых жидкостей, создающая гигиеническую среду в ране.



Комфорт движения

- Специальный набор повязок обеспечивает прочное прилегание к поверхности раны, сохраняя целостность повязки во время лечения для поддержания активного образа жизни пациента.
- Качественный уровень жизни и комфорт передвижения благодаря компактной мобильной конструкции.

Помимо этого, комфорт пациента ...

Усовершенствованная система лечения ран

TOPIVA[®] TOPICAL VACUUM TREATMENT UNIT
WOUND CARE



topi.vac



Topivac NPWT



TopiVac Advanced Wound Care



TopiVac - @topivacwoundcare



+90 (312) 354 60 40



info@amedus.com



www.topivac.com



Ostim OSB Mah. 100. Yil Blv No: 99/34

Yenimahalle 06374 Ankara/ Turkey



9001:2015



13485:2016

